


Инструкция по эксплуатации Infrared (Инфракред)

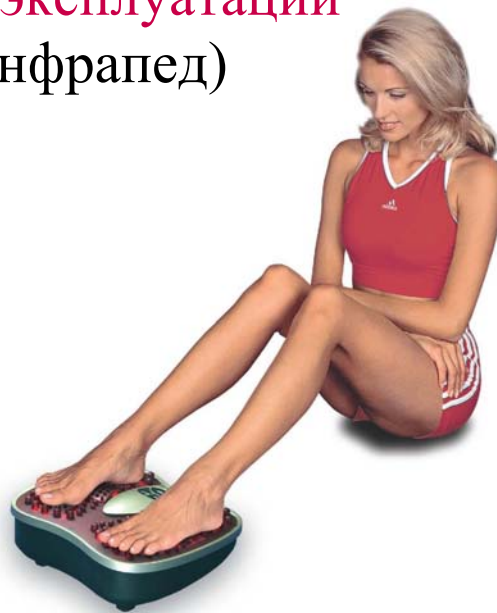

Мы поздравляем Вас!

При покупке Infrared Вы доказали, что Ваше сознание здорово. Чтобы Вы могли использовать преимущества этого массажного прибора долгое время, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации

Желаем Вам получить много удовольствия с массажным прибором *Инфракред!*

Требования безопасности

- Пожалуйста, удостоверьтесь, что напряжение соответствует условиям, обозначенным для массажера (только переменный ток);
- Всегда отключайте перед чисткой;
- Не использовать во влажных помещениях, таких как ванная комната;
- Не садитесь на массажер и не нажимайте на него слишком сильно;
- Не оставляйте массажер включенным без присмотра;
- Находитесь рядом при применении детьми или инвалидами;
- Храните массажер вдали от нагревательных приборов;
- Никогда не работайте с поврежденным шнуром. Если массажер поврежден, в каком либо месте, прекратите его использование. Не пытайтесь заменить поврежденный шнур самостоятельно;
- Используйте только дополнительные аксессуары, рекомендованные изготовителем;
- Незамедлительно остановите прибор, если Вы почувствовали, какой либо дискомфорт.

Уход

- Отсоединяйте провод электропитания от розетки перед началом очистки;
- Не используйте бензин, или другие растворители для очищения вашего массажера;
- Используйте сухую ткань. Никогда не используйте влажную ткань;
- Специально сконструированные механизмы этого массажера не требуют технического обслуживания;
- Не помещайте массажер в пыльную и влажную среду.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.

Функции и характеристики

Infrared разработан для проведения эффективного рефлекторного массажа уставших и больных ног. Рефлексогенные точки на ступнях ваших ног стимулируются специально спроектированными узлами.


Ввод в эксплуатацию

- Подключить к сети электропитания;
- Нажать на правой стороне переключатель ON/OFF, Чтобы включить массажер;
- Когда Infrared включен, он начнет работу на скорости II;

Использование автоматической программы массажа

- Удостоверьтесь, что массажер отключен и выключатель стоит в позиции OFF.
- Поставьте массажер на пол, подключите к сети электропитания 220В.
- Поставьте комфортно Ваши ноги на массажер.

Замечание: не становитесь на массажер.

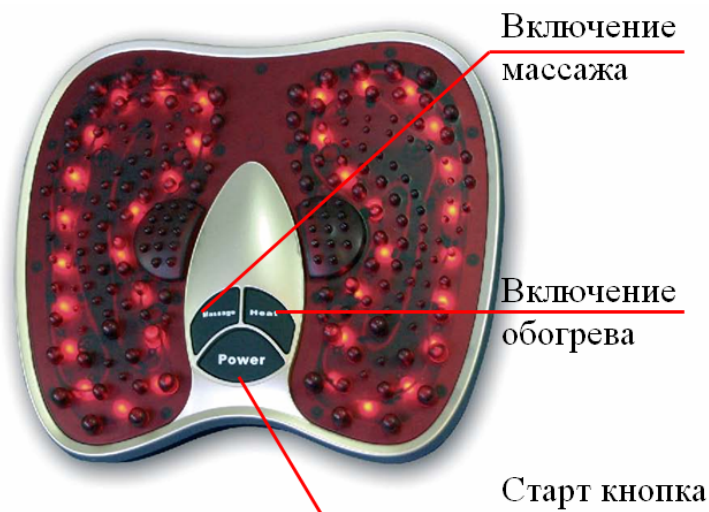

Одним нажатием кнопки POWER массажер включится, повторным нажатием он выключится


Массажер имеет 2 ступени вибрации. Высокая скорость вибрации активируется, если устройство массажа включается. Нажмите на кнопку MASSAGE один раз, чтобы замедлить скорость. Нажмите на кнопку снова, чтобы переключиться на высокую скорость вибрации.

Массажер имеет функцию инфракрасного обогрева. Чтобы активировать инфракрасный обогрев нажмите на кнопку HEAT. Через некоторое время обогрев будет чувствителен. Чтобы выключить эту функцию, нажмите на клавишу HEAT снова.

Технические данные

Напряжение:	220V, AC 50Hz
Потребление энергии	40 Ватт
Вес:	2 кг

Рефлексогенные зоны ступни:

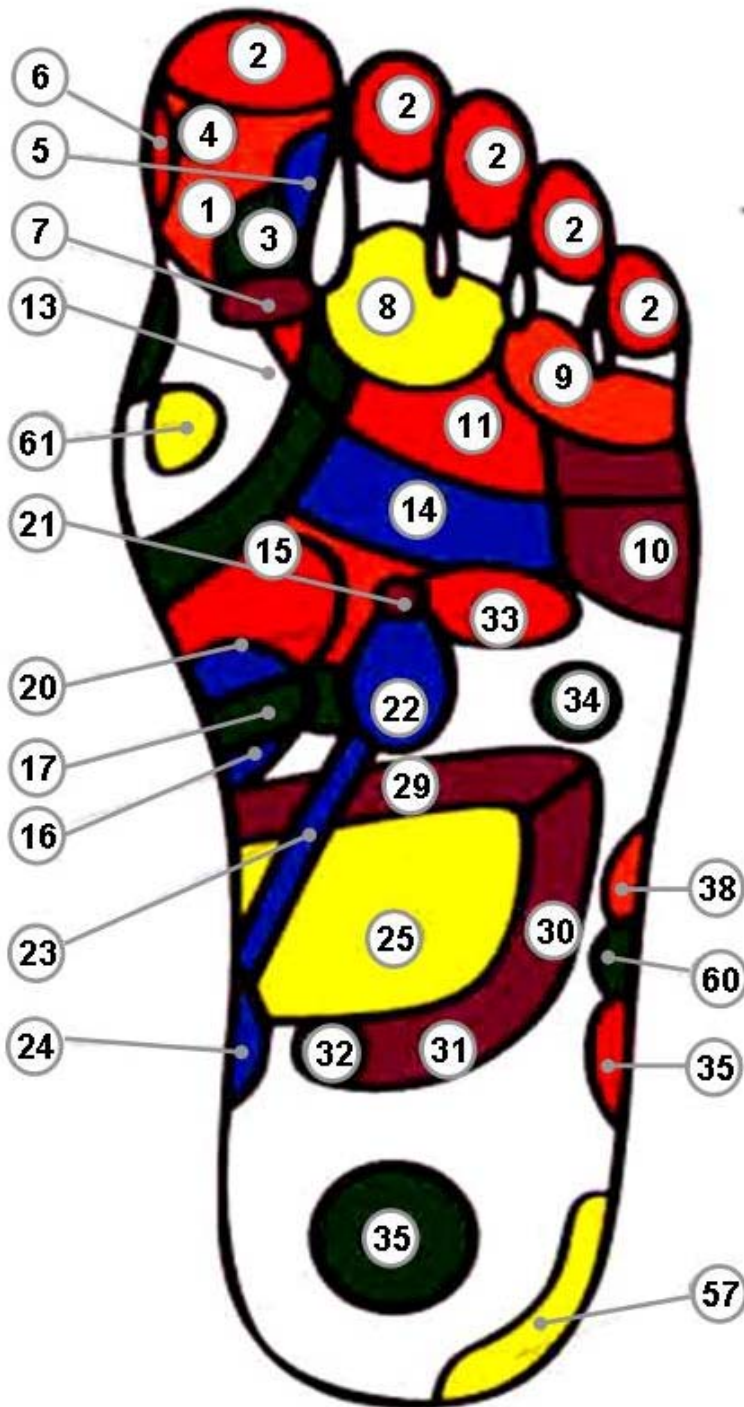

1. Голова, мозг, правая сторона
2. Лобные пазухи, правая сторона
3. Мозжечок, ствол головного мозга
4. Гипофиз
5. Тройничный нерв, висок справа
6. Нос
7. Затылок
8. Правый глаз
9. Правое ухо
10. Левое плечо
11. Трапецевидная мышца слева
12. Щитовидная железа
13. Околощитовидные железы
14. Легкие и бронхи слева
15. Желудок
16. Двенадцатиперстная кишка
17. Поджелудочная железа
18. Печень
19. Желчный пузырь
20. Солнечное сплетение
21. Надпочечники слева
22. Почка левая
23. Мочевыводящие пути слева
24. Мочевой пузырь
25. Тонкая кишка
29. Поперечная ободочная кишка
30. Нисходящая ободочная кишка
31. Прямая кишка
32. Анальное отверстие
33. Сердце
34. Селезенка
35. Левое колено
36. Половые железы, яичники слева
38. Тазобедренный сустав слева
57. Нервная система
60. Коленный сустав
61. Горло